


LABC-Labortechnik Informationen

Magnetrührstab ASTEROID 40

Bestell Nr.: 44040 statt 31,50 € **Angebotspreis: 27,99 €**
(gültig bis 31.12.2012, Angebot 54011)

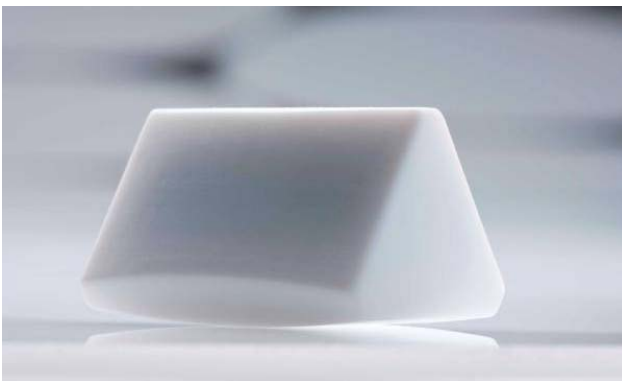

Magnetrührstab **ASTEROID 40**,

- neu entwickelt
- sehr leistungsfähig
- ideal für große Rührmengen
- viskose Medien
- Rühren **über Distanzen** oder bei ungünstigen Bodenformen.

Demnächst auch als **ASTEROID 25** und **ASTEROID 75** erhältlich.

Mehr als **4x höheres Drehmoment** übertragbar, unschlagbare Steigerung der Mischwirkung gegenüber konventionellen Rührstäben, hochenergetisches und dauerstabiles Magnetfeld, kein Entmagnetisierungseffekt, konkave Formgebung für minimale Auflagefläche bei gleichzeitig betriebssicherer Rotation, Dreieckskontur für kräftige Schubkraft, mehr Mischwirkung bei niedrigeren Drehzahlen.

300% weniger PTFE-Verschleiß als vergleichbare runde Rührstäbe, deutlich höhere Drehzahlen erreichbar, hochqualitative, glatte und versiegelte PTFE-Ummantelung, FDA-konform, dampfsterilisierbar bei 121°C.

Vielfache Leistungssteigerung für alle Magnetrührer!

Form: Dreieck, konkav
Material: (Ummantelung): PTFE
Maße: (DxL) Ø 28 x 40 mm
Gewicht: ca. 0,06 kg

